

# MEDISANA®

RC 410

**Массажное кресло  
инструкция  
RC 410**




max. 150 kg

CE Art. 88410

**Фирменный магазин**


**[www.medisanaonline.ru](http://www.medisanaonline.ru)**

**8 495 781-02-86**

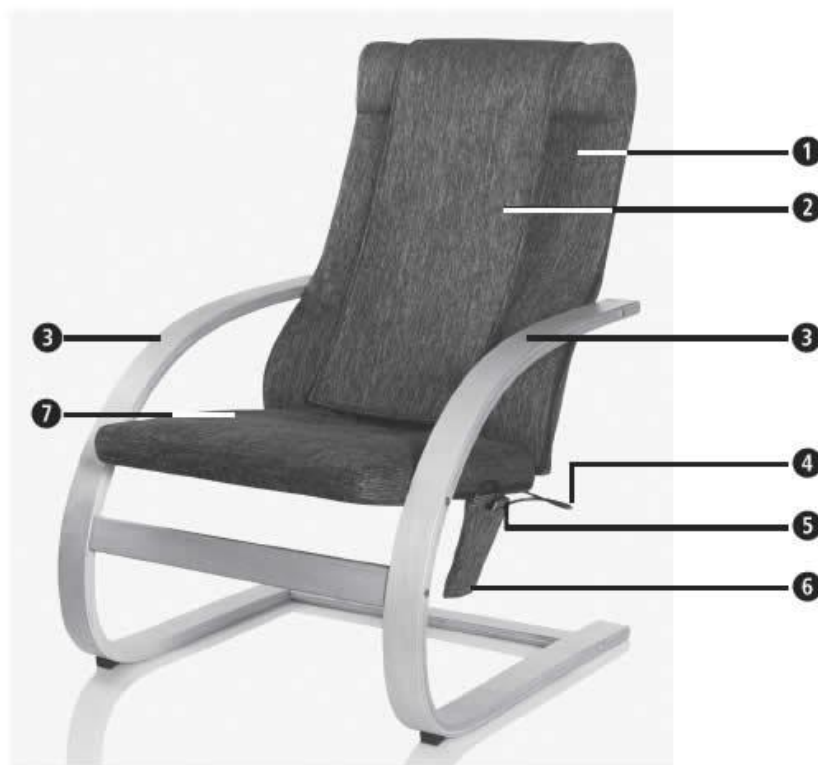

Русский

- 1 спинка
- 2 поддержка спины
- 3 подлокотник
- 4 кабель
- 5 блок управления
- 6 карман для хранения блока
- 7 сиденье

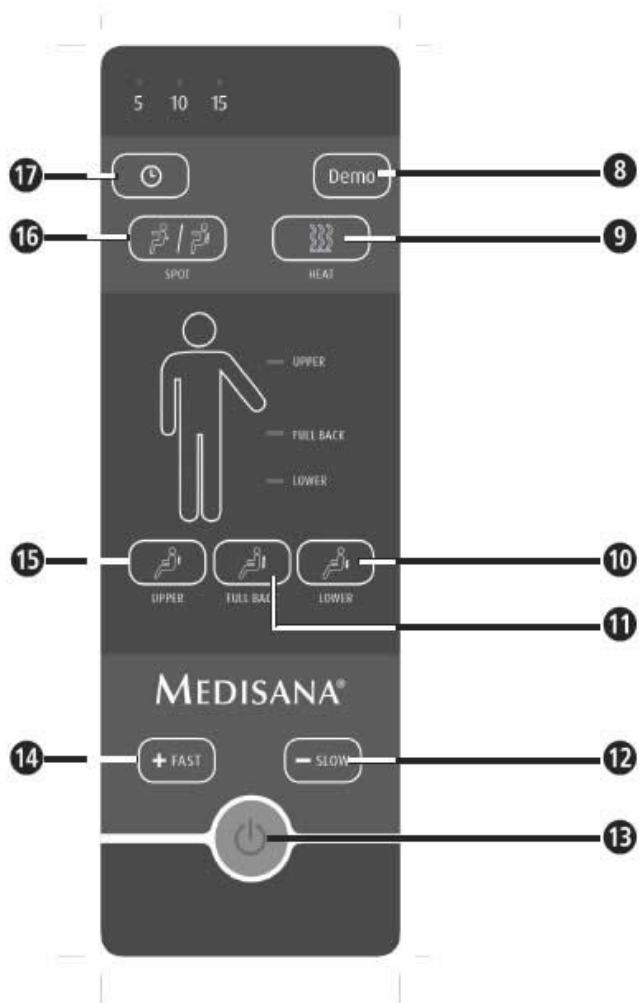

### Блок управления

- 8 демо режим
- 9 нагрев
- 10 массаж нижней части спины
- 11 массаж всей спины
- 12 SLOW медленный массаж
- 13 включение
- 14 массаж верхней части спины
- 15 FAST быстрый массаж
- 16 точечный массаж
- 17 таймер 5,10,15мин.

**Массажное кресло имеет две функции:**

Массаж с пальцем под давлением (массаж шиацу) и тепло. Функция тепла

Может использоваться только вместе с массажем Шиацу в области спины

Не используйте устройство более 15 минут.

Примерно через 15 минут устройство автоматически отключится.

Всегда полностью охлаждайте устройство, прежде чем использовать его снова.

1. Подключите кабель массажного кресла к источнику питания

и подключите шнур питания к розетке.

2. Теперь сядьте на сиденье 7

Функции устройства.

3. Включите устройство, нажав кнопку включения / выключения.

Выключение устройство

Нажмите кнопку включения / выключения. Светодиод управления работой начинает

моргать и массажные головки двигаются до положения парковки

Когда это будет достигнуто, светодиод погаснет.

3.1 функции

Демо-кнопка 8

Нажатие кнопки DEMO автоматически запускает устройство

Светодиоды показывают каждую активированную зону массажа и функции. Устройство останавливается, как только все функции будут завершены (3 минуты).

Кнопка нагрева 9

Нажмите кнопку HEAT, чтобы включить функцию, светодиод включен.

Блок управления и массажные головки загораются красным. Массажные головки излучались тепло. Еще раз нажмите кнопку, чтобы отключить функцию нагрева; светодиоды и красная подсветка массажных головок выключится.

Массаж шиацу

Нижняя кнопка (нижняя часть)

Головки массажа шиацу перемещаются в нижней части спины

кружась вверх и вниз. В соответствующих конечных положениях изменяя направление движения.

Верхняя кнопка

Головки массажа шиацу перемещаются в верхней части спины

кружась вверх и вниз В соответствующих конечных положениях изменяя направление движения.

Полная кнопка (целая спина)

Головки массажа Шиацу перемещаются из нижнего положения в верхнее.

В соответствующих конечных положениях изменяя направление движения.

Кнопка точечного массажа

Из режима массажа шиацу можно в любое время изменить в режим точечного массажа. Массажные головки вращаются в одном месте. Нажмите снова

нажмите клавишу, чтобы отключить функцию массажа точки и вернуться к шиацу

Кнопка FAST / SLOW

С помощью этих двух кнопок вы переключаетесь между двумя уровнями для всего

Массаж: быстрый (+) и медленный (-).

Кнопка таймера

С помощью кнопки таймера вы определяете продолжительность лечения. нажимая

кнопку переключает таймер на 5 минут (светодиод 5мит). Повторное нажатие кнопки переключает таймер на 10 минут (Загорится светодиод 10 мин ). Дальнейшее нажатие переключает таймер на 15 минут (светодиод 15 мин горит).

#### 4.1 Уборка и уход

- Перед чисткой прибора убедитесь, что прибор выключить и отключить вилку сетевого шнура от розетки есть. Очистите охлажденное устройство только влажной и мягкой тканью.

- Никогда не используйте агрессивные моющие средства, сильные Щетки, растворители или алкоголь. Это может испортить поверхность.

- Никогда не погружайте устройство в воду для чистки Убедитесь, что в устройство не попала вода.

- Не используйте прибор до полного высыхания.

- Разверните кабель, если он скручен.

#### 4.2 Инструкции по утилизации

#### 4.3 Технические данные

Название и модель MEDISANA массажное кресло RC 410

источник питания 100- 240 V~ 50/60 Hz, 1200 mA адаптер: 12V 3A

мощность 36 Вт

размеры 70 x 67 x 103 см

вес 25 kg

Номер EAN 40 15588 88410 8

Максимальный вес до 150 кг

Это устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Каждый потребитель должен использовать все электрические или электронные устройства, независимо от того, содержат ли они вредные вещества

или нет, в точке сбора его города

Текущую версию этого руководства можно найти на сайте [www.medisanaonline.ru](http://www.medisanaonline.ru).